

## Étiquette du patient

Ce médicament vous été prescrit  
et vous pouvez le prendre selon cet  
horaire proposé .....

### Entreposage :

**Veillez conserver votre INTERMATE lors de la réception :**

- Au réfrigérateur
- À température de la pièce

Les seringues BD Posiflush XS sont conservées à température pièce.

## INTERMATE



① NE PAS TOUCHER, NE PAS DEVISSER

② CLAMPE

③ TUBULURE

④ BOUCHON CÔTÉ PATIENT

## CATHÉTER INTRAVEINEUX



① CLAMPE

② EMBOUT DU CATHÉTER

### I. Les étapes pour vous préparer avant la perfusion:

1. Sortir l'intermate du réfrigérateur au moins 1 heure ou plus avant l'administration selon les conseils de votre pharmacien. Éviter la chaleur excessive, le gel ou encore la lumière directe.
2. Assurez-vous que l'intermate soit bien identifié à votre nom et que le médicament et le dosage soient exacts. Vérifier que la date de péremption ne soit pas dépassée.
3. Lavez-vous les mains selon les instructions de votre infirmier puis rassemblez tout votre matériel dans une aire de travail propre.

### II. Vous aurez besoin de :

- Intermate (biberon)
- Tampons d'alcool
- Seringues d'eau saline BD Posiflush XS


## Comment irriguer votre cathéter avec une solution saline comme les seringues BD Posiflush XS?

Pour le rinçage de votre cathéter, référez-vous aux instructions de votre infirmier.



1

Nettoyer l'embout du cathéter avec un tampon d'alcool pendant 1 minute puis laisser sécher. Ne pas souffler pour assécher.

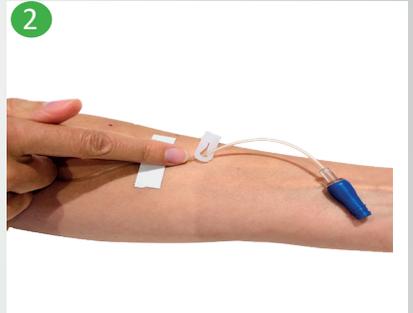

2

Déclamper la pince sur votre cathéter.



3

Déballer votre seringue de son emballage plastique. En maintenant la seringue pointe vers le haut, dévisser délicatement le bouchon sans découvrir la pointe de la seringue.



4

Pousser le piston légèrement pour libérer la bulle d'air. Dévisser complètement le bouchon de la seringue d'eau saline. Éviter de toucher l'extrémité de la seringue.



5

Visser la seringue à votre embout de votre cathéter. Injecter lentement la solution saline.




6

Clamper la pince sur votre cathéter. Dévisser la seringue pour la retirer.

**Si vous devez suivre le rinçage de votre cathéter avec de l'héparine après la solution saline, procéder de la même façon qu'aux étapes ci-haut.**

## Comment brancher votre intermate?

1

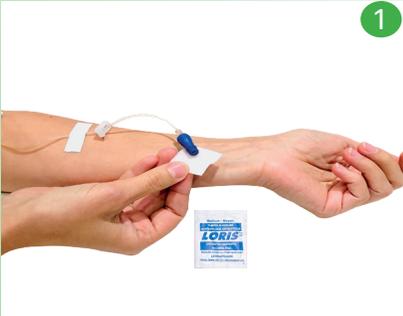


Nettoyer l'embout du cathéter avec un tampon d'alcool pendant 1 minute puis laisser sécher. Ne pas souffler pour assécher.

2




Vérifier que la clampette de l'intermate soit bien fermée. Retirer le bouchon bleu foncé au bout de la tubulure et le déposer sur un tampon d'alcool. Ne pas toucher l'extrémité de la tubulure de l'intermate.

3

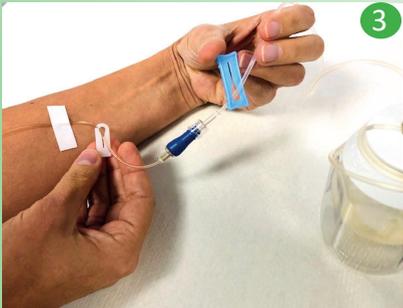

Visser la tubulure de l'intermate à l'embout de votre cathéter sans trop serrer. Ouvrir la clampette sur la tubulure de l'intermate ainsi que la clampette sur votre cathéter. Votre médicament est maintenant en mode perfusion.

4

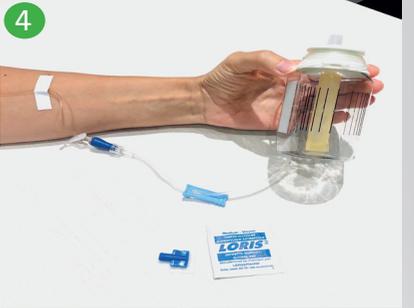

Votre médicament devrait s'écouler selon le temps indiqué sur votre étiquette. (généralement 30 ou 60 minutes) Lorsque votre intermate est complètement dégonflé, le médicament a été administré.

5



Une fois terminée, fermer la clampette sur la tubulure de l'intermate ainsi que la clampette sur votre cathéter. Ensuite, débrancher l'embout de la tubulure de votre cathéter et remettre le bouchon bleu au bout de l'intermate.

6



Désinfecter l'embout du cathéter avec un tampon d'alcool pendant 1 minute puis laisser sécher. Procéder au rinçage indiqué.

**Si l'intermate ne semble pas s'écouler, vérifier les éléments suivants :**

- L'intermate est à la température ambiante.
- Les clampes sur votre cathéter et votre intermate sont en position ouverte.
- La tubulure de l'intermate n'est pas coincée ou pliée à un endroit.

Si vous éprouvez des difficultés pour la perfusion de votre médication ou que vous avez des questions, vous pouvez rejoindre notre pharmacien 24h/7 jours en composant le **514-526-7773 Ext #6**.

**Vous pouvez également communiquer avec l'infirmier du CLSC ou composer le 811.**

**PHARMACIE  
TORANI ET HADDAD**

**CP**  
**SpecPharma**  
TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS

8500 Blvd Decarie Suite 100  
Mont Royal, Québec, H4P 2N2  
Téléphone : +1 514-526-7773 et 1844-526-7771  
Télécopieur : +1 514-312-9119